

**PAJUNK®**

## *FlowSys*

*Instrumente zum  
Saugen und Spülen*



**Saug- und Spülsysteme**

MADE IN GERMANY

## Alles im Griff

# Handgriffe zum Saugen und Spülen

Das PAJUNK® Instrumentensystem zum Saugen und Spülen ist modular aufgebaut und besteht aus Handgriffen und Rohren. Diese lassen sich innerhalb einer Serie beliebig miteinander kombinieren, und ihre Montage bzw. Demontage erfolgt ganz ohne Werkzeuge. Die unterschiedlichen Ausführungen ermöglichen eine genaue Abstimmung auf die individuellen Erfordernisse und erhöhen die Sicherheit für Anwender und Patienten.

- **Umfassendes Sortiment**
- **Genaue Abstimmung auf individuelle Erfordernisse**
- **Größtmögliche Sicherheit für Patienten und Anwender**

## Handgriffe

Zur Wahl stehen insgesamt vier verschiedene Handgriffe. Sie sind alternativ auch mit zusätzlichem HF-Anschluss für die Koagulation erhältlich (siehe Broschüre HF-Chirurgie).

### FlowSys Ergo und FlowSys Eco

FlowSys Ergo und FlowSys Eco sind sowohl für Links- als auch für Rechtshänder einfach zu bedienen. Die Saug- und Spülstärke lässt sich stufenlos über einen Regler einstellen.

FlowSys Ergo  
Pistolenhandgriff



FlowSys Eco  
Pistolenhandgriff



### FlowSys und FlowSys Twin

Die Handgriffe mit Trompetenventil liefert PAJUNK® in zwei Ausführungen – als FlowSys mit einfachem Ventileinsatz und als FlowSys Twin mit Doppeltrompetenventil. Dieser Handgriff liegt durch seine ergonomische Griffplatte leicht in der Hand und wird mit Zeige- und Mittelfinger bedient.

FlowSys



FlowSys Twin



## FlowSys Ergo

### Starke Leistung – maximaler Bedienkomfort

Der FlowSys Ergo überzeugt als optimierte Ausführung hauptsächlich durch seine Ergonomie und Leistungsstärke.



### Einhändige Bedienung

Kurzer Bedienwinkel und ergonomisches Design.

- **Einfache Einhandbedienung, unabhängig von Handgröße**



### Wartungsfrei

Dank einer speziellen Konstruktion der Buchse ist der Hahn nach der Säuberung wartungsfrei.



### Im Handumdrehen fast sofort wieder einsetzbar

Der wiederverwendbare Handgriff besteht aus wenigen Einzelteilen.

- **Das spart Zeit bei der Reinigung und Vorbereitung**


## Saug-Spül-Systeme

# Mehr Flexibilität beim Saugen und Spülen

### Saug-Spül-Systeme

#### FlowSys Ergo: Der Handgriff der kurzen Wege

Der FlowSys Ergo zeichnet sich durch seine Feinsteuerung und eine optimierte Saug-Spül-Leistung aus.

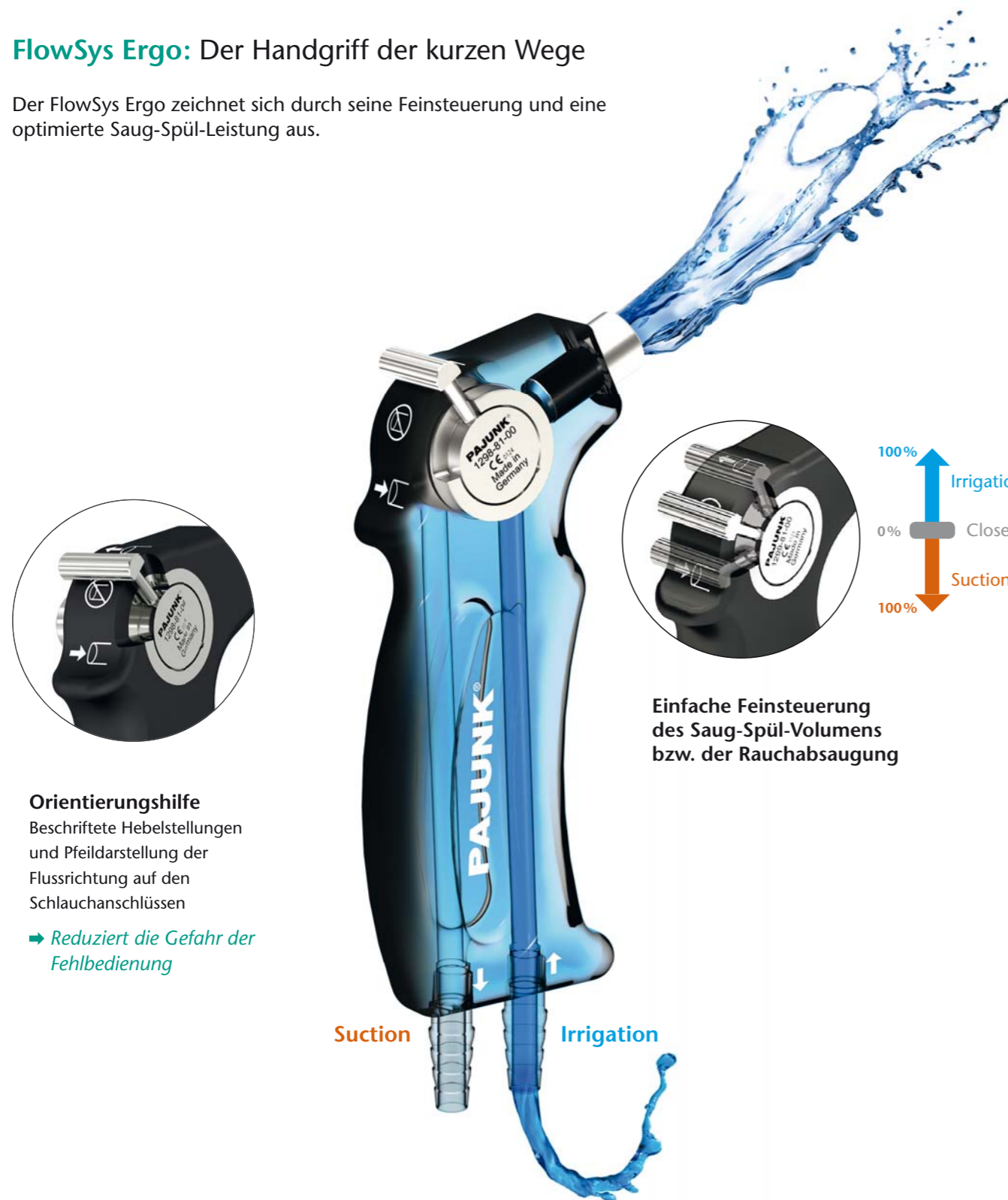

#### Orientierungshilfe

Beschriftete Hebelstellungen und Pfeildarstellung der Flussrichtung auf den Schlauchanschlüssen


→ Reduziert die Gefahr der Fehlbedienung

Einfache Feinsteuerung des Saug-Spül-Volumens bzw. der Rauchabsaugung

#### FlowSys Tube: Saug-Spül-Rohre

Passend für:  Saugen/Spülen  Mehrweg


Die Saug-Spül-Rohre können in beliebiger Größe mit allen vier Handgriffen kombiniert werden. Sie sind in unterschiedlichen Ausführungen erhältlich:

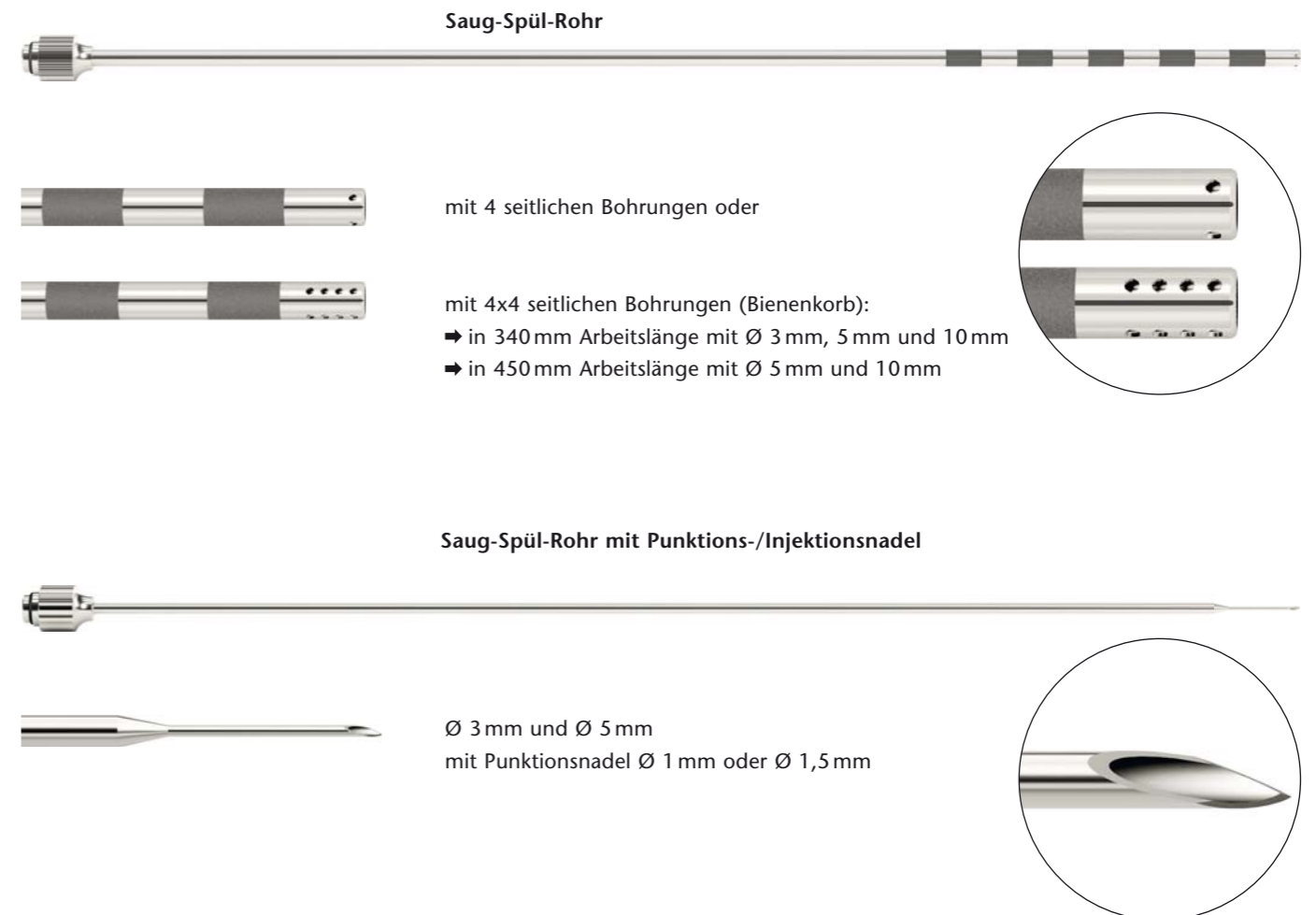

## BigFlow: Das Hochleistungs-Saug-Spül-System

- Saugen/Spülen  Mehrweg

Der BigFlow verfügt über einen integrierten Saugschlauch-Anschluss und einen Universal-Spülanschluss. Für dieses System ist kein zusätzlicher Handgriff erforderlich. Der Saugkanal und das 2-Wege-Ventil dieses Hochleistungs-Saug-Spül-Systems haben einen Durchmesser von je 10 mm. Entsprechend empfiehlt sich sein Einsatz immer dann, wenn Gewebeteile mit abgesaugt werden. Dank des großen Durchlasses kann ein Verstopfen von Ventil und Saug-Spül-Rohr nahezu ausgeschlossen werden.

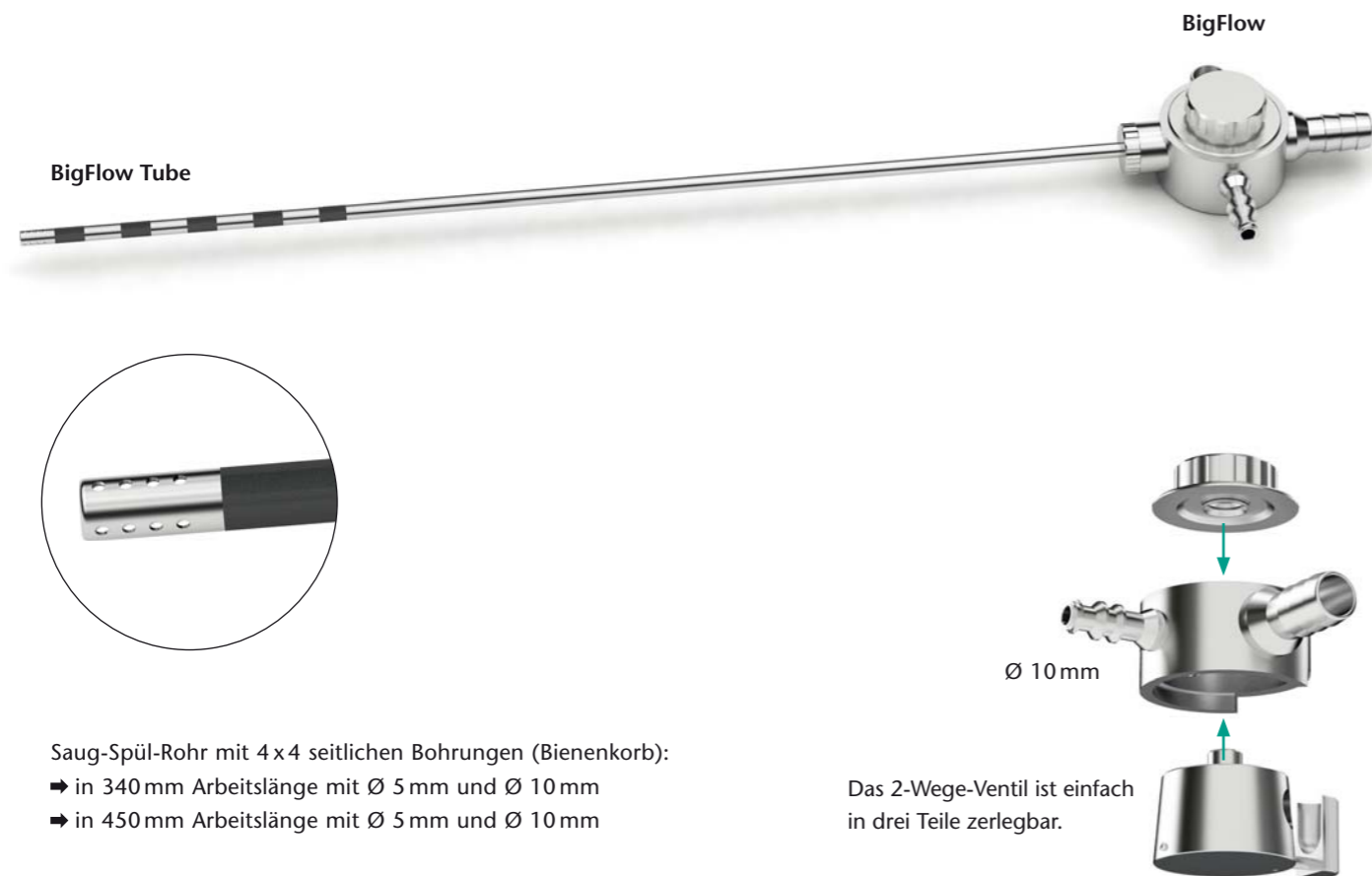

Saug-Spül-Rohr mit 4x4 seitlichen Bohrungen (Bienenkorb):  
 ➔ in 340 mm Arbeitslänge mit Ø 5 mm und Ø 10 mm  
 ➔ in 450 mm Arbeitslänge mit Ø 5 mm und Ø 10 mm

Das 2-Wege-Ventil ist einfach in drei Teile zerlegbar.

## Saug-Spül-Systeme Alles auf einen Blick

### FlowSys

Produkt	Artikelbezeichnung	Bestell-Nr.
FlowSys	Saug-Spül-System mit Trompetenventil, M8 x 1 mm	1298-01-00
FlowSys Twin	Saug-Spül-System mit Doppel-Trompetenventil, abnehmbarer Griffplatte, austauschb. Rohr, M8 x 1 mm	1298-41-00
FlowSys Eco	Saug-Spül-System mit wartungsfreiem 2-Wegeventil, Pistolengriff, M8 x 1 mm	1298-61-00
FlowSys Eco+	Saug-Spül-System mit wartungsfreiem 2-Wegeventil in Edelstahl, Pistolengriff, Anschluss M8 x 1 mm	1298-62-00
FlowSys Ergo	Saug-Spül-System mit ergonomischem Pistolengriff und wartungsfreiem 2-Wegeventil in Edelstahl	1298-81-00

### FlowSys Tube

Produkt	Artikelbezeichnung	Arbeitslänge	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
			Ø 3 mm	Ø 5 mm	Ø 10 mm
Adaptierbares Saug-Spül-Rohr M8 x 1 mm	Distales Ende graduiert mit 4 Bohrungen	340 mm	1298-00-03	1298-00-05	1298-00-10
		450 mm		1298-00-05L	1298-00-10L
	Distales Ende graduiert mit Bienenkorb (4x4 Bohrungen)	340 mm	1298-00-04	1298-00-06	1298-00-11
		450 mm		1298-00-06L	1298-00-11L
	Artikelbezeichnung	Injektions-/ Punktionsnadel Ø	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
			Ø 3 mm	Ø 5 mm	Ø 10 mm
	Mit Injektions-/Punktionsnadel, Anschluss M8 x 1 mm	1 mm	1298-00-00	1298-00-01	
		1,5 mm		1298-00-02	

### BigFlow

Produkt	Artikelbezeichnung	Arbeitslänge	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.	Bestell-Nr.
			Ø 3 mm	Ø 5 mm	Ø 10 mm
BigFlow	2-Wegeventil mit Anschluss M14 x 0,5 mm sowie Saugschlauch-Anschluss Ø 10 mm und Universal-Spülanschluss mit Luer-Lock				1288-50-00
BigFlow Tube	Adaptierbares Saug-Spül-Rohr mit Anschluss M14 x 0,5 mm, mit 4x4 Bohrungen	340 mm		1288-50-06	1288-50-11
		450 mm		1288-50-06L	1288-50-11L



---

**PAJUNK® GmbH**  
Medizintechnologie  
Karl-Hall-Straße 1  
D-78187 Geisingen  
Telefon +49 (0) 77 04/92 91-0  
Telefax +49 (0) 77 04/92 91-6 00  
[www.pajunk.com](http://www.pajunk.com)

**PAJUNK® Medical Produkte GmbH**  
D.A.CH • BeNeLux  
Karl-Hall-Straße 1  
D-78187 Geisingen  
Telefon +49 (0) 77 04/80 08-0  
Telefax +49 (0) 77 04/80 08-150  
[www.pajunk.com](http://www.pajunk.com)