

# PAJUNK®



REGIONAL ANAESTHESIA  
& PAIN MANAGEMENT

## NRFit®

Produkte & Serviceleistungen für die neuen Verbindungsstücke  
nach ISO 80369-6 in der **Regionalanästhesie**




MADE IN GERMANY 


# NRFit® – Der neue Standard in der Regionalanästhesie

Um die Risiken von Fehlkonnektionen und Fehlinjektionen zukünftig zu vermeiden, wurde die neue DIN ISO 80369 im Jahr 2016 verabschiedet. Die Norm definiert für jeden der fünf Anwendungsbereiche innerhalb der Norm einen eigenen inkompatiblen Anschluss und ersetzt somit den übergreifenden Luer Konnektor: 80369-2 für Atemsysteme und Antriebsgasanwendungen, 80369-3 (**ENFit®**) für Enterale Ernährung, 80369-5 für aufblasbare Manschettensysteme für Gliedmaßen, 80369-6 (**NRFit®**) für Neuroaxiale Anwendungen und 80369-7 (LUER) für intravaskuläre oder hypodermische Anwendungen. Als führender Hersteller in der Regionalanästhesie bietet PA-JUNK® das komplette Portfolio für Neuroaxiale Anwendungen, Regionalanästhesie, Wundinfiltration und Lumbalpunktion mit dem nach ISO 80369-6 genormten Anschluss an. Diese Broschüre gibt Ihnen einen Einblick in die bereits verfügbaren Artikelgruppen und unser Servicepaket für eine erfolgreiche Umstellung auf NRFit.


## NRFit auf einen Blick – was ändert sich?

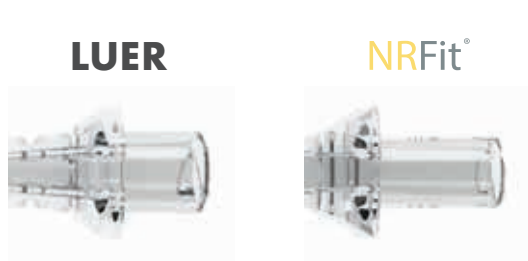

LUER → NRFit®

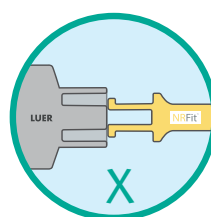


NRFit® → LUER

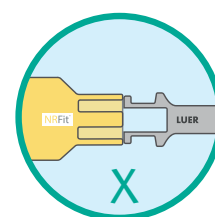

### Neuer Ansatz

Alle Ansätze an Kanülen und Komponenten sind von der Umstellung betroffen.

- Der NRFit Anschluss ist **20% schmaler und 3 mm länger** als der Luer-Anschluss. Außerdem ist der NRFit Slip-Anschluss mit einem zusätzlichen Außenkonus ausgestattet.

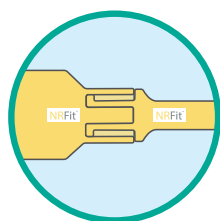

### Vermeidung von Fehlkonnektionen

Die Problematik von Fehlkonnektionen oder Fehlinjektionen wird mit der neuen Norm reduziert.

- NRFit-Anschlüsse können nicht mit Luer-Anschlüssen verbunden werden.
- Für eine bessere Unterscheidbarkeit sind alle NRFit-Anschlüsse gelb markiert.



### Eingeschränkte Kompatibilität

Die NRFit-Anschlüsse sind nur für die in der ISO Norm 80369-6 definierten Anwendungen vorgesehen und kompatibel.

### Änderung im Produktnamen

Produkte mit dem neuen ISO 80369-6 Konnektor erhalten den Zusatz "NRFit".

Fit für **NRFit**

# Der PAJUNK® Rundum-Service für eine erfolgreiche Umstellung



## Sofort einsatzbereit: Standard & Kundenspezifische NRFit Sets

Um die Umstellungsphase von LUER zu NRFit so einfach wie möglich zu gestalten, bietet Pajunk komplette Standardsets mit zusätzlichen NRFit Komponenten wie Spritzen, Aufzieh-/Filterkanülen, Filterhalme, etc. an. Auch kundenspezifische Sets können Sie ganz nach Ihren Bedürfnissen und Prozessen bei uns konfigurieren. Unabhängig Ihrer Präferenz, werden wir gemeinsam mit Ihnen die richtige Lösung für Sie finden.



## Orientierung: Klare Kennzeichnung & Verpackung

Die gelbe NRFit-Kennzeichnung auf Produkten und Verpackungen ermöglicht eine einfache Identifizierung und reduziert Verwechslungen.

## Beratung: Planung, Vorstellung & Umsetzung

Es sind verschiedene Bereiche, wie Beschaffung, Lagerhaltung, Schulungen, Wartung und Anwendung vom Umstellungsprozess betroffen. Pajunk unterstützt Sie mit den notwendigen Informationen, hilft Ihnen, die Risiken des Umstellungsprozesses richtig einzuschätzen und begleitet Sie bei der Ausarbeitung des Umstellungskonzeptes mit verschiedenen Dienstleistungen rund um die folgenden Aspekte:



### Beschaffungsmanagement

- Änderung der Artikelnummern
- Bedarfsanalyse /-planung für die jeweiligen Anwendungsbereiche

### Lagerhaltung

- Separate Lagerhaltung für die unterschiedlichen Konnektoren
- Bedarfsgerechte Lagerhaltung aller benötigten Teile

### Medizinische Anwendung

- Anwendungstraining mit dem neuen Konnektor
- Bestimmung aller betroffenen Prozesse in der Regionalanästhesie


## Das Pajunk NRFit Produktportfolio:

Spinal/Epidural/CSE, Nervenblockaden, Lumbalpunktion, Wundinfiltration

# NEUROAXIAL ANÄSTHESIE


## Spinalanästhesie

SPROTTE® Sets & IntraLong Kathetersets

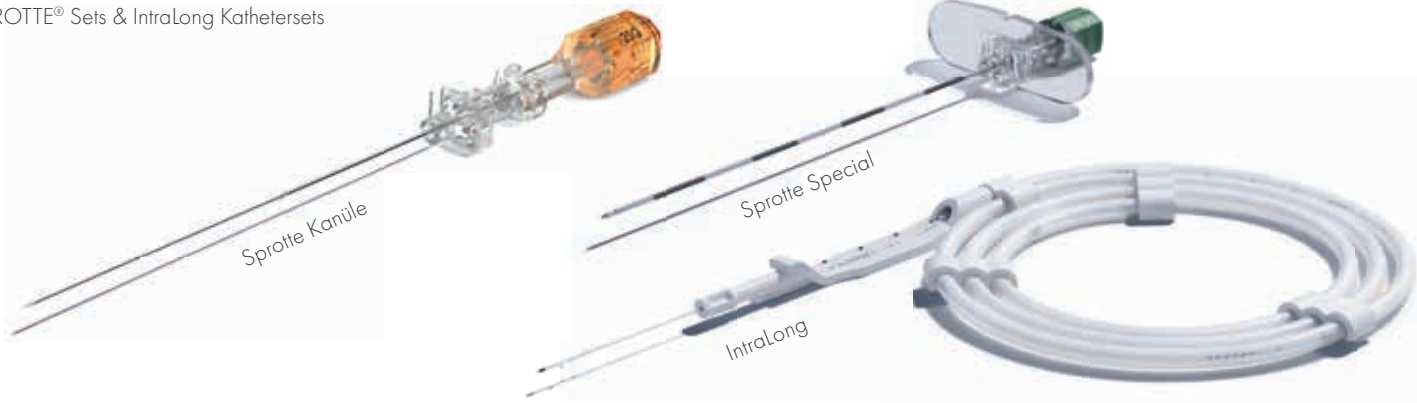


## Epiduralanästhesie

EpiLong II & EpiLong II Soft Sets

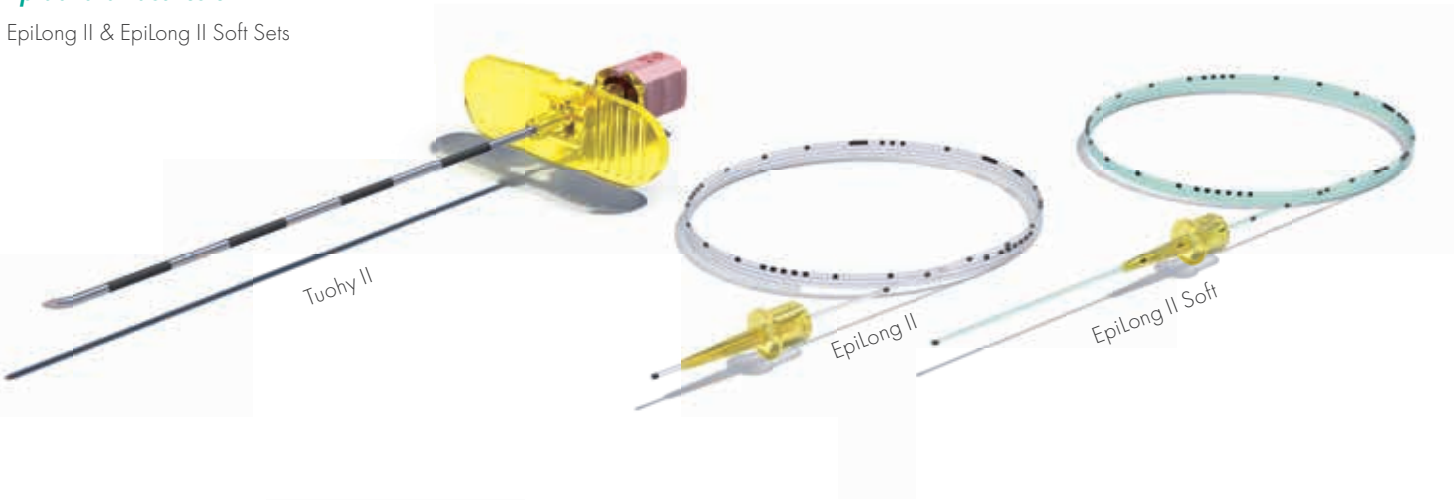

## Kombinierte Spinal- und Epiduralanästhesie (CSE)

EpiSpin Sets

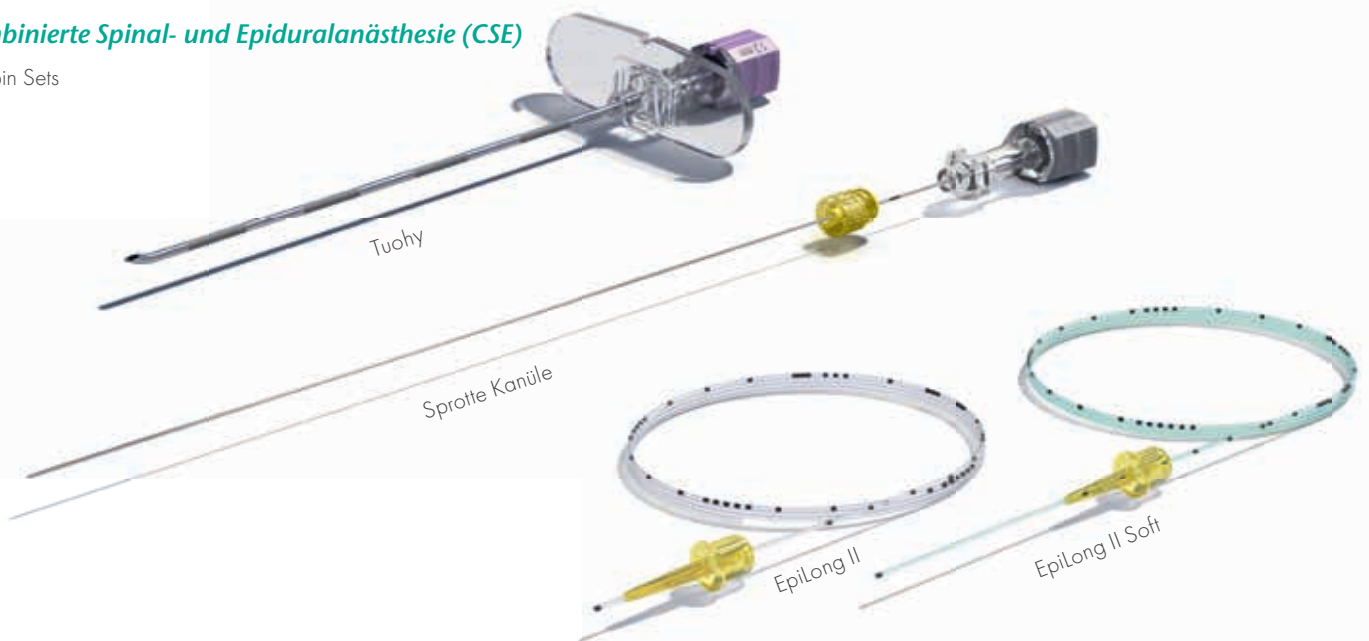


# NERVENBLOCKADE

## SingleShot Technik



## Kontinuierliche Technik

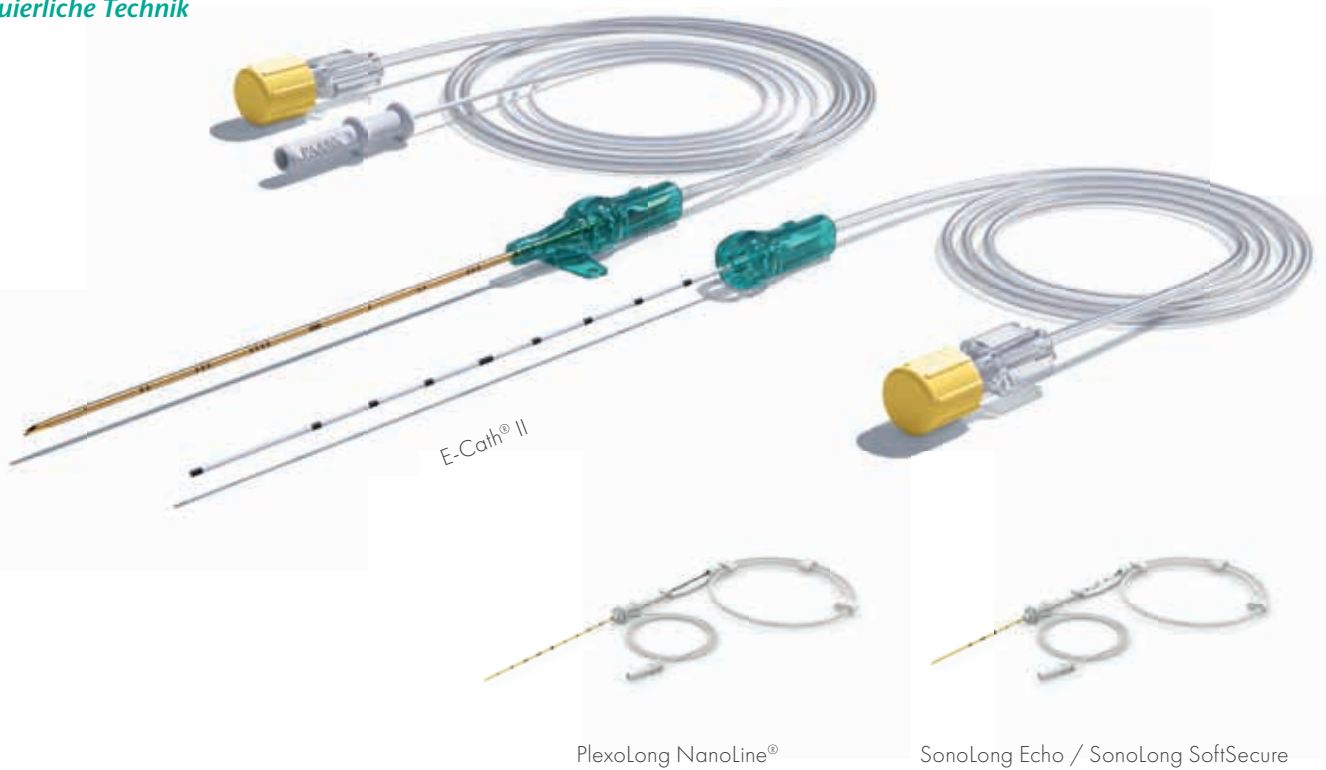

# LUMBALPUNKTION

## Lumbalpunktion



# WUNDINFILTRATION

## Kontinuierliche Wundinfiltration

FuserPump & InfiltraLong Sets



# ZUBEHÖR

## Konnektion für Spritzenpumpen



Spike (belüftet)



Zuleitung für  
Spritzenpumpen

## Pumpen



FuserPump



Spritze 50 ml Lock



Spike (belüftet)



CareVis® Pumpe

## Weiteres NRFit® Zubehör



Spritze 3 ml



Spritze 5 ml



LOR 7 ml Slip



Clamping Adapter



Filterhalm



Filterkanüle



Aufziehkanüle



FixoLong



Filter 0,2 µm



Verschlusskappe  
(männlich)



Verschlusskappe  
(weiblich)

\* Nicht alle Produkte sind in allen Ländern oder Regionen registriert und für den Verkauf zugelassen. Auch die Anwendungshinweise können je nach Land und Region variieren. Bitte wenden Sie sich an Ihren Vertreter, um Informationen über die Verfügbarkeit zu erhalten. Produktabbildungen dienen nur als Referenz.

\*NRFit® is a registered trademark of GEDSA used with their permission.

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie  
Hauptsitz  
Karl-Hall-Straße 1  
78187 Geisingen, Deutschland  
Tel.: +49 7704 9291-0  
Fax: +49 7704 9291-600  
info@pajunk.com  
pajunk.com

PAJUNK® Medical Produkte GmbH  
Zentraleuropa  
Karl-Hall-Straße 1  
78187 Geisingen, Deutschland  
Tel.: +49 7704 8008-0  
Fax: +49 7704 8008-150  
info@pajunk-medipro.com  
pajunk.de & pajunk.eu

PAJUNK® Swiss AG  
Schweiz  
Neuhofstrasse 5A  
6340 Baar, Schweiz  
Tel.: +41 417 609 627  
info@pajunk.ch  
pajunk.ch

PAJUNK® Medical System L.P.  
USA  
4575 Marconi Drive  
Alpharetta, GA 30005, USA  
Tel.: +1 888 972 5865  
Fax: +1 678 514 3388  
info@pajunk-usa.com  
pajunkusa.com

PAJUNK® UK Medical Products Ltd  
United Kingdom  
Unit D1 The Waterfront  
Goldcrest Way, Newburn Riverside  
Newcastle upon Tyne, NE15 8NY, UK  
Tel.: +44 191 264 7333  
info@pajunk.co.uk  
pajunk.co.uk