

EpiSpin

Kanülen und Katheter-Sets für die
kombinierte Spinal- und Epiduralanästhesie



Zwei wesentliche Features kombiniert in einem innovativen Produkt


Mit EpiSpin bietet PAJUNK® ein Punktionsset an, welches zwei Techniken in einem Produkt vereint; die einzeitige, atraumatische Spinalanästhesie durch die SPROTTE® Kanüle und die Platzierung eines Epiduralkatheters durch eine Tuohy Kanüle. Das Backeye der Tuohy Kanüle ermöglicht eine bestmögliche Positionierung der Sprötte Kanüle und somit eine reibungslose Spinalanästhesie. Außerdem werden dadurch Beschädigungen an der Kanülenspitze minimiert. Das integrierte Locking-System oder die Kanülenfixierung sorgen für die Stabilisierung der Sprötte Kanüle während der Injektion des Anästhetikums. Dadurch verringert sich die Gefahr der Dislokation der Kanüle.

i ERHÄLTICHE VARIANTEN

Einzigartiges Locking-System

Die Sprötte-Kanüle lässt sich leicht an der gewünschten Stelle positionieren.

- Ermöglicht einhändige Verriegelung der Sprötte-Kanüle
- Ermöglicht eine 360°-Drehung der Sprötte Kanüle zur optimalen Positionierung der Kanülenöffnung
- Stufenloser Fixierungsmechanismus

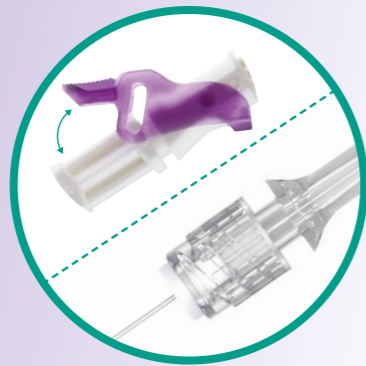

Kanülenfixierung


Einfaches Fixieren der Sprötte Kanüle in der gewünschten Position.

- Ermöglicht eine 360°-Drehung der Sprötte Kanüle zur optimalen Positionierung der Kanülenöffnung

Lupenansatz

Der Lupenansatz ermöglicht eine einfache Visualisierung von Blut oder Liquor.

- Leichtere Erkennung von Liquorrückfluss

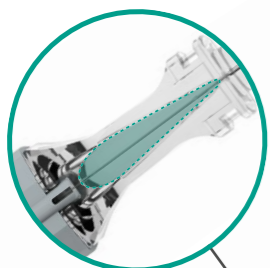

Innovatives Locking-System

Tuohy Kanüle mit abnehmbarer Griffplatte

Austrittsmarkierung




Die Markierung am Schaft der Sprötte Kanüle signalisiert den Austritt der Kanülenspitze durch das Backeye der Tuohy Kanüle.

- Erleichtert die Platzierung der Sprötte Kanüle

Backeye

Die zusätzliche distale Öffnung in der Tuohy Schliffgeometrie ermöglicht die optimale Positionierung der Sprötte Kanüle.

- Kein Verbiegen der Spinalkanüle beim Einbringen in die Tuohy Spitze, um Beschädigungen an der Kanülenspitze zu minimieren
- Ausschließlich für die Sprötte Kanüle konzipiert, nicht für den Epiduralkatheter
- Die Spinalpunktionskanüle tritt maximal 14 mm aus

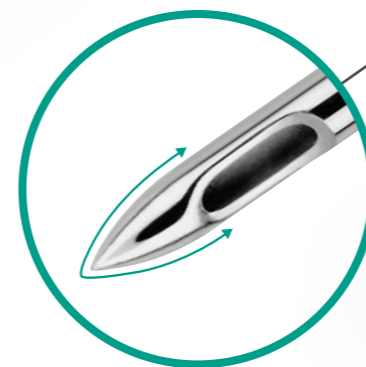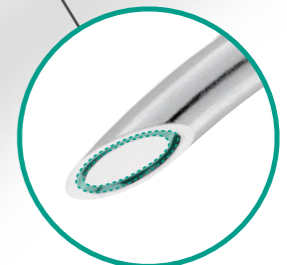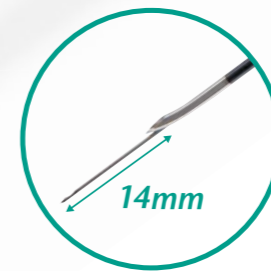

Präzisionsgeschliffenes Metallstilet

Standardmäßige Ausstattung mit bündig geschliffenem Metallstilet für höhere Stabilität der Kanüle.

- Bündiger Abschluss von Metallstilet und Kanüle verringert die Gefahr der Gewebeverschleppung

Atraumatische Spitzengeometrie

Die ogivenförmige Spitze reduziert das PPKS-Risiko erheblich und die abgerundeten Kanten des lateralen Auges minimieren Traumata der Dura Mater.^{1,2,3}

- Minimiert die Wahrscheinlichkeit von PPKS
- Sehr gute taktile Wahrnehmung



Auch in NRFit® erhältlich

EpiSpin Lock Sets

EpiLong Katheter

Distal geschlossene Spitze und drei seitliche Öffnungen

Tuohy	EpiLong Katheter	SPROTTE®	Artikel-Nr.	VE	FixoLong	Filter 0.2 µm	Clamping Adapter	LOR 10 ml
18G x 135mm (5 3/8")	20G x 90cm (35")	25G	0121351-18	10	●	●	●	
18G x 90mm (3 1/2")	20G x 90cm (35")	27G	0001351-30	10	●	●		
18G x 90mm (3 1/2")	20G x 90cm (35")	27G	0021351-30	10	●	●	●	
18G x 90mm (3 1/2")	20G x 90cm (35")	25G	0021351-18	10	●	●	●	
18G x 90mm (3 1/2")	20G x 90cm (35")	25G	0001351-18	10	●	●		
16G x 90mm (3 1/2")	19G x 90cm (35")	25G	0021351-17	10	●	●	●	●

EpiSpin Lock Soft Sets

EpiLong Soft Katheter

Integrierte Edelstahlspirale, distal geschlossene Spitze und sechs seitliche Öffnungen

Tuohy	EpiLong catheter	Sprotte	Artikel-Nr.	VE	Filter 0.2 µm	Clamping Adapter	LOR 10 ml
18G x 90mm (3 1/2")	20G x 90cm (35")	27G	0021352-30	10	●	●	●
18G x 90mm (3 1/2")	20G x 90cm (35")	25G	0021352-18	10	●	●	●

EpiSpin SAFETY NRFit®

EpiLong Katheter

Distal geschlossene Spitze und drei laterale Öffnungen; mit Kanülenfixierung

Tuohy mit Metallstilet	EpiLong Katheter	Sprotte	NRFit Artikel-Nr.*	VE	FixoLong	Filter	Clamping Adapter	LOR 10 ml
18G x 90mm (3 1/2")	20G x 90cm (35")	27G	1022461-30	10	●	●	●	●
18G x 90mm (3 1/2")	20G x 90cm (35")	25G	1022461-18	10	●	●	●	●

* Mit Kanülenfixierung. Set beinhaltet eine Filterkanüle NRFit 18G x 50mm

EpiSpin Soft SAFETY NRFit

EpiLong Soft Katheter

Integrierte Edelstahlspirale, distal geschlossene Spitze und sechs seitliche Öffnungen

Tuohy mit Metallstilet	EpiLong Katheter	Sprotte	NRFit Artikel-Nr.*	VE	FixoLong	Filter	Clamping Adapter	LOR 10 ml
18G x 90mm (3 1/2")	18G x 90mm (3 1/2")	25G	1022362-18	10	●	●	●	●

* Mit Kanülenfixierung. Set beinhaltet eine Filterkanüle NRFit 18G x 50mm

EpiSpin Lock Kanülen

Locking-System, Tuohy Kanüle mit Backeye

Tuohy	Sprotte	Artikel-Nr.	VE
18G x 90mm (3 1/2")	27G	0011351-30	10
18G x 90mm (3 1/2")	25G	0011351-18	10

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie
Hauptsitz
Karl-Hall-Straße 1
78187 Geisingen, Deutschland
Tel.: +49 7704 9291-0
Fax: +49 7704 9291-600
info@pajunk.com
pajunk.com

PAJUNK® Medical Produkte GmbH
Zentraleuropa
Karl-Hall-Straße 1
78187 Geisingen, Deutschland
Tel.: +49 7704 8008-0
Fax: +49 7704 8008-150
info@pajunk-medipro.com
pajunk.com

PAJUNK® Medical System L.P.
USA
6611 Bay Circle, Suite 140
Norcross, GA 30071, USA
Tel.: +1 770.493.6832
Fax: +1 678.514.3388
info@pajunk-usa.com
pajunkusa.com

PAJUNK® UK Medical Products Ltd
Großbritannien
Unit D1 The Waterfront
Goldcrest Way, Newburn Riverside
Newcastle upon Tyne, NE15 8NY, UK
Tel.: +44 191 264 7333
info@pajunk.co.uk
pajunk.co.uk