

SonoTAP® II

Echogene, nicht-stimulierende
Single Shot Kanüle für interfasziale Blockaden

Interfasziale Blockaden, wie TAP, QL, ESP, usw., sind im Kommen und stellen eine bedeutsame Alternative zur Epiduralanästhesie oder Vollnarkose dar. Insbesondere diese Blöcke beruhen jedoch ausschließlich auf der Erfahrung der Anwender und der Echogenität von Kanülenschaft und Kanülenspitze. Mit der SonoTAP hat PAJUNK® eine spezielle Kanüle für interfasziale Blockaden unter Ultraschall entwickelt. Die SonoTAP Kanüle ist mit den patentierten Cornerstone Reflektoren für optimierte Echogenität versehen.





Fest montierter Zuspritzschlauch

- Geschlossenes System
- Leckagen werden ausgeschlossen



Farbcodierter Kanülenansatz

- Leichte Identifizierung von Kanüledurchmessern

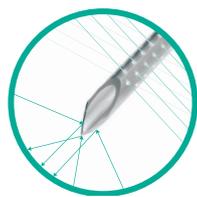
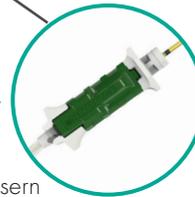


Echogene Kanülenspitze

- Facettenschliff mit zwei Neigungswinkeln
- Verbessert die Sichtbarkeit unter Ultraschall

Tiefengraduierung

- Einstichtiefe leicht zu erkennen und zu identifizieren

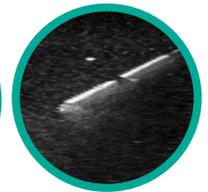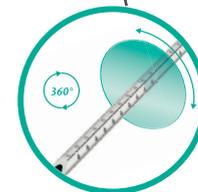

Cornerstone Reflektoren

- 360° Aordnung auf den ersten 20mm der Kanüle
- Optimierte Ultraschallsichtbarkeit des Kanülenschafte¹
 - Zuverlässige und optimierte Echogenität der Kanüle bei steileren Einstichwinkeln

1. Edgcombe H., Hocking G. (2010 March-April) Sonographic identification of needle tip by specialists and novices: a blinded comparison of 5 regional block needles in fresh human cadavers. Reg. Anesth. Pain Med., 35(2): 207-211

SonoTAP® II

Echogene, nicht-stimulierende
Single Shot Kanüle für interfasziale Blockaden

SonoTAP II	Größe	Artikel-Nr.	NRFit® Artikel-Nr.	VE
Facettenschliff	24G x 40mm (1 5/8")	1285-3Y040	1265-3Y040	10
	22G x 50mm (2")	1285-3E050	1265-3E050	10
	22G x 80mm (3 1/5")	1285-3E080	1265-3E080	10
	21G x 110mm (4")	1285-3F110	1265-3F110	10
	21G x 150mm (6")		1265-3F150	10

NRFit® is a registered trademark of GEDSA used with their permission.

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie
Hauptsitz
Karl-Hall-Straße 1
78187 Geisingen, Deutschland
Tel.: +49 7704 9291-0
Fax: +49 7704 9291-600
info@pajunk.com
pajunk.com

PAJUNK® Medical Produkte GmbH
Zentraleuropa
Karl-Hall-Straße 1
78187 Geisingen, Deutschland
Tel.: +49 7704 8008-0
Fax: +49 7704 8008-150
info@pajunk-medipro.com
pajunk.de & pajunk.eu

PAJUNK® Swiss AG
Schweiz
Neuhofstrasse 5A
6340 Baar, Schweiz
Tel.: +41 41 760 96 27
info@pajunk.ch
pajunk.ch

PAJUNK® Medical System L.P.
USA
4575 Marconi Drive
Alpharetta, GA 30005, USA
Tel.: +1 770.493.6832
Fax: +1 678.514.3388
info@pajunk-usa.com
pajunkusa.com

PAJUNK® UK Medical Products Ltd
Großbritannien
Unit D1 The Waterfront
Goldcrest Way, Newburn Riverside
Newcastle upon Tyne, NE15 8NY, UK
Tel.: +44 191 264 7333
info@pajunk.co.uk
pajunk.co.uk