





## SonoTAP® II

### Echogene, nicht-stimulierende, Single Shot Kanüle für periphere Nervenblockaden

Interfasziale Blockaden, wie TAP, QL, ESP usw., sind im Kommen und stellen eine bedeutsame Alternative zur Epiduralanästhesie oder Vollnarkose dar. Insbesondere diese Blöcke beruhen jedoch ausschließlich auf der Erfahrung der Anwender und der Echogenität von Kanülenschafte und Kanülenspitze.

Mit der SonoTAP hat PAJUNK® eine spezielle Kanüle für interfasziale Blockaden unter Ultraschall entwickelt, die mit den patentierten Cornerstone Reflektoren für optimierte Echogenität versehen ist.

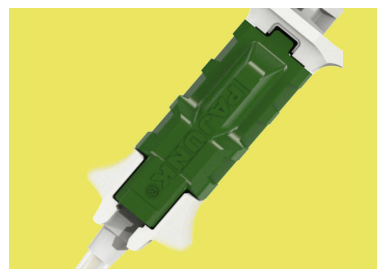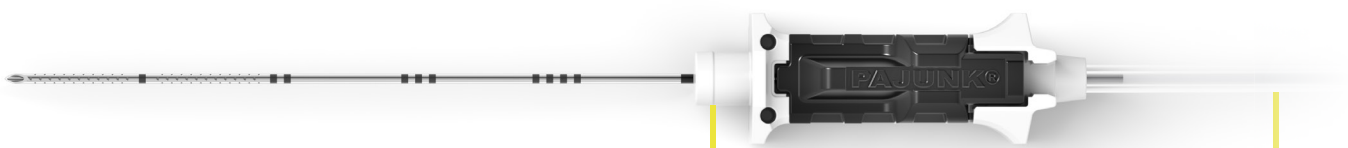

#### Farbcodierter Kanülenansatz

- » Leichte Identifikation vom Kanülendurchmesser.



#### Fest montierter Zuspritzschlauch

- » Geschlossenes System.
- » Leckagen werden ausgeschlossen.


# Echogenic, Non-Stimulating Single Shot Plane Block Needle

## SonoTAP® II




### Tiefengraduierung

In einer intensiven schwarzen Farbe:  
 » Einstichtiefe leicht zu erkennen und zu identifizieren.

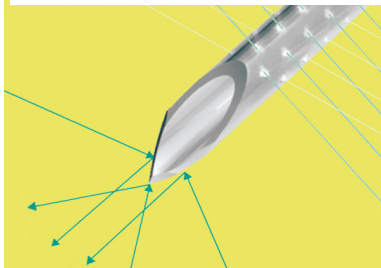

### Echogene Kanülenspitze

Facettenschliff mit zwei Neigungswinkeln:  
 » Verbessert die Sichtbarkeit der Kanülenspitze unter Ultraschall.

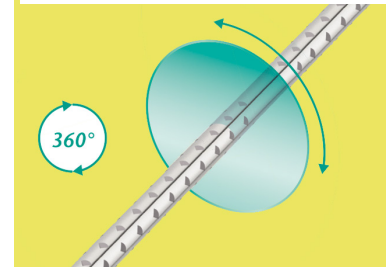

### Cornerstone Reflektoren

360° Anordnung auf den ersten 20mm der Kanüle:  
 » Optimierte Ultraschallsichtbarkeit des Kanülenschafts und der Kanülenspitze<sup>1</sup>  
 » Zuverlässige und optimierte Echogenität der Kanüle bei steileren Einstichwinkeln

**SonoTAP II**  
 Facettenschliff

Kanülengröße	Artikel-Nr.	NRFit Artikel-Nr.	VE
24G x 40mm (1 5/8")	1285-3Y040	1265-3Y040	10
22G x 50mm (2")	1285-3E050	1265-3E050	10
22G x 80mm (3 1/5")	1285-3E080	1265-3E080	10
21G x 110mm (4")	1285-3F110	1265-3F110	10
21G x 150mm (6")	1285-3F150	1265-3F150	10

NRFit® is a registered trademark of GEDSA used with their permission.

PAJUNK® GmbH Medizintechnologie  
 Internationaler Vertrieb

Karl-Hall-Straße 1  
 78187 Geisingen, Deutschland  
 Tel.: +49 7704 9291-0  
 Fax: +49 7704 9291-600  
 info@pajunk.com  
 pajunk.com

PAJUNK® Medical Produkte GmbH  
 Zentraleuropa

Pajunkstraße 2  
 78187 Geisingen, Deutschland  
 Tel.: +49 7704 8008-0  
 Fax: +49 7704 8008-150  
 info@pajunk-medipro.com  
 pajunk.de & pajunk.eu

PAJUNK® Swiss AG  
 Schweiz

Neuhofstrasse 5A  
 6340 Baar, Schweiz  
 Tel.: +41 417 609 627  
 info@pajunk.ch  
 pajunk.ch

PAJUNK® Medical System L.P.  
 USA

4575 Marconi Drive  
 Alpharetta, GA 30005, USA  
 Tel.: +1 888 972 5865  
 Fax: +1 678 514 3388  
 info@pajunk-usa.com  
 pajunkusa.com

PAJUNK® UK Medical Products Ltd  
 Großbritannien

Unit D1 The Waterfront  
 Goldcrest Way, Newburn Riverside  
 Newcastle upon Tyne, NE15 8 NY, UK  
 Tel.: +44 191 264 7333  
 info@pajunk.co.uk  
 pajunk.co.uk

XS260003DE  
 02/25

CE 0124