


PAJUNK®



REGIONAL ANAESTHESIA
& PAIN MANAGEMENT

UniPlex®

Stimulierbare Single Shot Kanüle
zur Nervenblockade

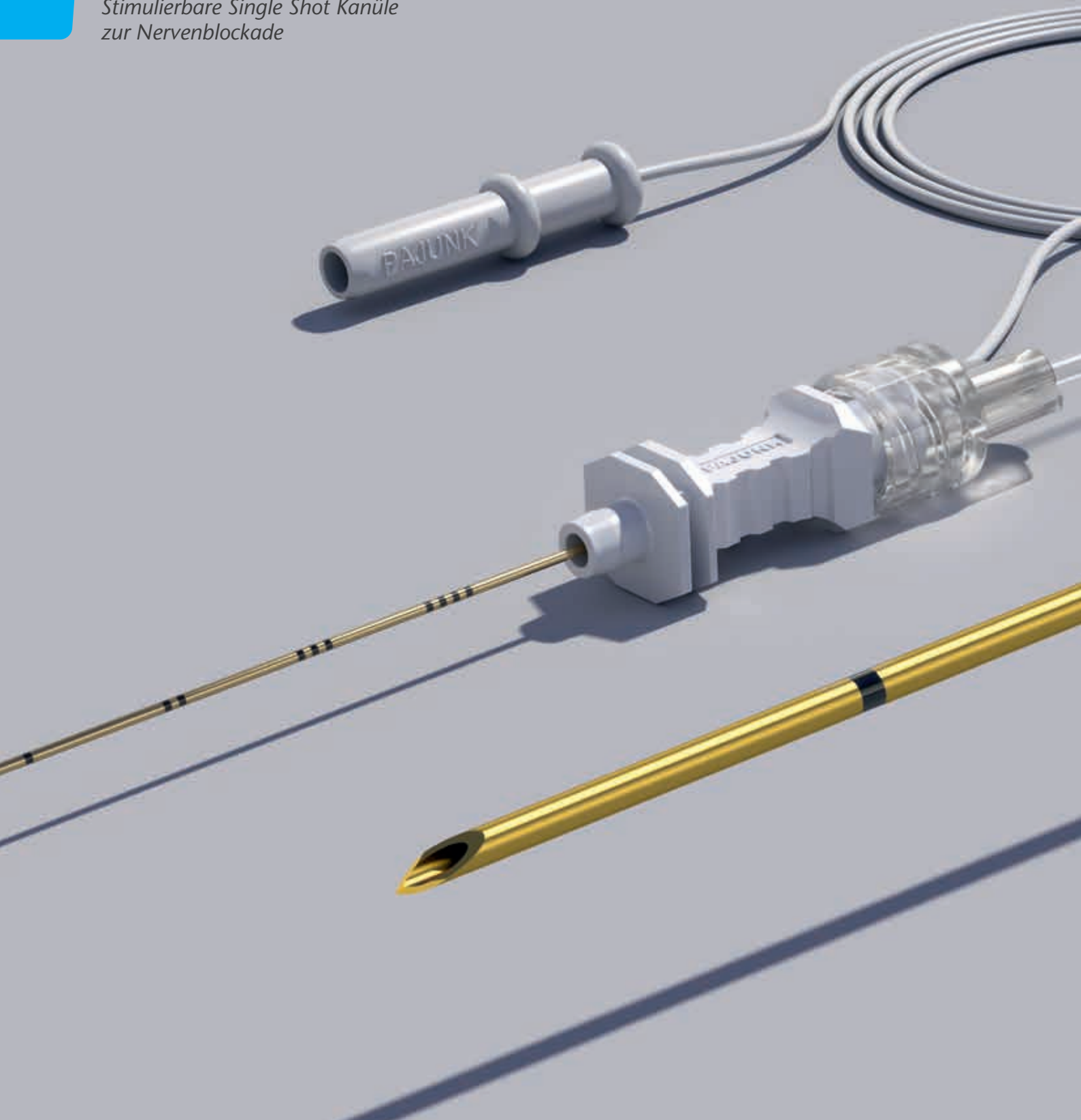

Die stimulierbare Kanüle mit NanoLine® Beschichtung

Die UniPlex NanoLine Kanüle wurde speziell für die einzeitige Nervenblockade entwickelt. Die Punktion erfolgt mittels Stimulation. Mit der Einführung der NanoLine Technologie wurde PAJUNK® zum innovativen Technologieführer für stimulationsgestützte Nervenblockaden. Die neue Art der Beschichtung bietet verbesserte Gleiteigenschaften und präzise Stimulation. Dank minimaler Schichtdicke bleibt der Außendurchmesser nahezu unverändert.

→ Alle beschichteten Pajunk Kanülen für periphere Nervenblockaden sind mit der NanoLine Technologie ausgestattet, welche hervorragende Gleiteigenschaften aufweist.

i

VERFÜGBARE OPTIONEN

UniPlex II NRFit®

Stimulierbare Single Shot Kanüle für Nervenblockaden mit nicht abnehmbarem Zuspritzschlauch, abnehmbarem Stimulationskabel, farbcodiertem Kanülenansatz und NanoLine Beschichtung

Mehr Informationen auf: pajunk.com

NanoLine Beschichtung

Sehr dünne Polymerschicht, glatte Oberfläche, präzises Innen- und Außenlumen

- Garantiert hervorragende Punktions- und Gleiteigenschaften dank der glatten Oberfläche
- Verbessert die Sichtbarkeit unter Ultraschall¹
- Präzise Stimulation durch die abisolierte Kanülenspitze

Tiefengraduierung

- Einstichtiefe leicht zu erkennen und zu identifizieren

Echogene Kanülenspitze

Facettenschliff mit zwei Schliffwinkeln

- Verbessert die Sichtbarkeit der Kanülenspitze unter Ultraschall



Auch in NRFit® erhältlich

UniPlex Kanüle
mit Facettenschliff

Größe	UniPlex Artikel-Nr.	UniPlex II NRFit® Artikel-Nr.	VE
25G x 35 mm (1 3/8")	001156-80	001246-80	10
25G x 50 mm (2")	001156-81	001246-81	10
25G x 80 mm (3 1/5")	001156-86		10
24G x 25 mm (1")	001156-75	001246-75*	10
24G x 50 mm (2")	001156-85		10
22G x 40 mm (1 5/8")	001156-70	001246-70	10
22G x 50 mm (2")	001156-74	001246-74	10
22G x 80 mm (3 1/5")	001156-71	001246-71	10
22G x 100 mm (4")	001156-84		10
22G x 120 mm (4 3/4")	001156-82	001246-82	10
21G x 100 mm (4")	001156-77	001246-77	10
20G x 120 mm (4 3/4")	001156-72	001246-72	10
20G x 150 mm (6")	001156-76	001246-76	10
20G x 180 mm (7 1/4")	001156-73		10

UniPlex Kanüle
mit Facette S Schliff

Größe	UniPlex Artikel-Nr.	UniPlex II NRFit Artikel-Nr.	VE
25G x 35 mm (1 3/8")	001157-80		10
22G x 40 mm (1 5/8")	001157-70		10
22G x 50 mm (2")	001157-74	001247-74	10
21G x 100 mm (4")	001157-77	001247-77	10

UniPlex Kanüle
mit SPROTTE® Spitze

Größe	UniPlex Artikel-Nr.	UniPlex II NRFit Artikel-Nr.	VE
25G x 50 mm (2")	001156-29G		10
24G x 40 mm (1 5/8")	001156-30G		10
22G x 50 mm (2")	001156-31G	001246-31G	10
22G x 70 mm (2 3/4")	001156-31H		10
22Gx 90 mm (3 1/2")	001156-31J	001246-31J	10
22G x 150 mm (6")	001156-28L	001246-28L	10

*24G x 30 mm (1 1/5")